




IMPORTANT INFORMATION ON HOW TO REPLACE THE ELECTRODES

BELANGRIJKE INFORMATIE HOE DE ELEKTRODEN TE VERWIJSELEN

 PLEASE READ THE FOLLOWING STEPS AND MAKE SURE YOU UNDERSTAND BEFORE TAKING ANY ACTIONS


 LEEST U AUB ONDERSTAANDE INSTRUCTIES EERST ZODAT U BEGRIJPT WAT TE DOEN ALVORENS DE ACTIE UIT TE VOEREN

-  A) Remove the bag containing the AED from its location and place it on a firm surface to avoid any accidents happening either to you as a user or to the AED itself.


 Haal de AED met de tas van de locatie waar u deze hebt opgehangen en plaats de AED op een veilige plek en harde ondergrond zodat u de actie op een makkelijk kunt uitvoeren.




-  B) Open the bag containing the AED and place the AED in a space that you can easily move and perform easy tasks.


 Open de tas van de AED door de ritssluiting te openen. Doe dit op een plek waar u makkelijk kunt manoeuvreren om de actie uit te voeren.




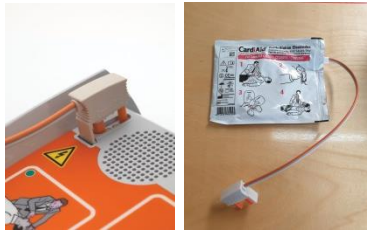
-  C) Open the AED itself with care and confirm that the electrodes are connected to the AED. The electrodes are placed in front of the first aid bag.


 Open de AED door de klep te openen en check of deze aan de AED verbonden zijn. De elektroden zitten in de plastic uitsparing van de etui met Eerste Hulpmiddelen voor reanimatie.



-  D) With care, remove the electrode cable that connects to the AED from the plug and place the old electrodes somewhere safe, so you do not mix old electrodes with the ones replaced.


 Verwijder nu voorzichtig de kabel van de AED door de connector uit de socket omhoog te trekken waarmee de elektroden aan de AED verbonden zijn. Zorg ervoor dat de elektroden niet worden gemixt met het pakket wat u ontvangen heeft.




-  E) Go ahead and after you remove the electrodes, replace them with the new units we have sent to you by connecting the cable of the NEW electrodes to the AED plug.


 Zorg er nu voor dat de toegezonden NIEUWE elektrode in de socket van de AED wordt geplaatst.




-  F) Place the electrode pouch in front of the first aid bag as they were previously.


 Plaats het zakje van de elektrode van de Eerste Hulp bij reanimatie etui zoals u ze eerder aantrof. Dus in de plastic uitsparing van de etui.



-  G) Proceed with closing the cover of the AED, making a priority that cables do not over-extend and are **INSIDE** the unit. If not, to avoid having the cable cut or damaged, please reorganize cabling.


 Ga verder met het sluiten van de klep en zorg ervoor dat de gehele kabel binnen de uitsparing van de klep komt te zitten en niet ertussen.




-  H) Once that is done, proceed with placing the AED back in the bag of the AED and placed on its original location.

 Zodra dit gedaan is, zet u de AED weer op de plek waar u deze vandaan heeft gehaald.



 Dispose of the old electrodes. There is no need to send the old electrodes back to your local distributor.

 De oude elektroden kunnen bij het restafval worden gegooid. Deze hoeven niet te worden geretourneerd.

