

VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING IN HET VELD

Team3 foetale monitor

Product waarop dit bericht van toepassing is:

Productnaam(en):	TEAM3A & TEAM3I
Betrokken serienummers:	Alle
Bestel-/identificatiecodes (DI):	Zie bijlage 1 voor alle varianten
Producteerst verkocht:	oktober 2016

GMDN:	37796
EMDN:	Z12080101
SRN:	SE-MF-000000696
Basis UDI-DI:	5060693520389WY
510k/goedkeuringsnummer:	K200975/D410520
HC-licentienummer:	104905 (Antepartum) & 104907 (Intrapartum)
ARTG-identificatie:	116216

Resolutie in het kort:	Foetale monitorupgraden met herziene software (v19.4.1)
Geen pagina's:	15 inclusief het aangifteformulier

FSN01-23-Rev 2

Datum van uitgifte: 3 april 2023

Herzien: 25 april 2023

HUNTLEIGH

A MEMBER OF THE ARJO FAMILY

Voorwie het aangaat;

We nemen contact met u op om informatie te verstrekken over een update van de onlangs gelanceerde corrigerende actie voor veldveiligheid.

Het is ons ter ore gekomen dat hoewel de upgrade naar versie 19.4-software in de overgrote meerderheid van de gevallen succesvol is geweest, we een probleem hebben vastgesteld bij het upgraden van sommige eenheden. Het probleem doet zich voor wanneer er een grote hoeveelheid gegevens is bewaard in de TEAM3-patiëntdatabase, waardoor het apparaat wordt gereset wanneer de database wordt doorzocht.

Als oplossing voor dit probleem en ter compensatie van de grote hoeveelheid gegevens die wordt bewaard, is een kleine software-update (Patch) ontwikkeld. Als gevolg van deze ontwikkeling moet het upgradeproces worden voltooid met behulp van de herziene Software (versie 19.4.1).

Houd er rekening mee dat het bewaren van een grote hoeveelheid patiëntendossiers op de TEAM3 de optimale prestaties van het systeem zal verminderen en de reactiesnelheid van de patiëntinvoeropdracht zal vertragen.

Het wordt aanbevolen dat de Team3 een archiveringssysteem gebruikt, omdat dit het beheer van patiëntendossiers vergemakkelijkt zonder de prestaties van de Team3 in gevaar te brengen.

De herziene software - 19.4.1 is beschikbaar via dezelfde kanalen als de vorige versie en wordt als volgt volledig beschreven;

Beschrijving van probleem;

Huntleigh Healthcare Ltd is zich bewust geworden van een softwarekwetsbaarheid, die zich manifesteert doordat het touchscreen van de foetale monitor bevriest. Deze bevriezing schakelt de functies uit die worden weergegeven. Hoewel het optreden van dit beveiligingslek uiterst zeldzaam is en het geluid aanwezig blijft tijdens het bevroren van het scherm, is tussenkomst van de gebruiker vereist om de foetale monitor opnieuw op te starten.

Risicogebaseerde aanpak;

Door besprekingen met de Britse bevoegde autoriteit (MHRA) is overeengekomen om de noodzaak van tussenkomst van de gebruiker weg te nemen door de foetale monitor automatisch opnieuw op te starten wanneer het apparaat stroomuitval en/of interferentie detecteert. De automatische herstart herstelt alle functies/kenmerken en instellingen. De herstarten zullen verschijnen als A normale AAN/UIT-actie en duurt ongeveer 20 seconden van start tot finish met de actie genoteerd op de CTG-trace en een tijdelijke opmerking op het aanraakscherm.

Houd er rekening mee dat Dawes Redman CTG-analyse wordt gereset naar het begin van de analyse nadat het systeem automatisch opnieuw is opgestart.

Door de Gebruiker en/of Distributeur te ondernemen acties;

Het is belangrijk dat de patiëntendatabase wordt beheerd met een minimale inhoud van de database. Er moet een software-upgrade – V19.4.1 – worden geïnstalleerd op de TEAM3-foetale monitoren die worden vermeld in bijlage 1.. Deze upgrade kan worden gedownload van de website van Huntleigh Healthcare (<https://www.huntleigh-diagnostics.com/Team3Upgrade19.4.1>). samen met duidelijke instructies voor het installeren van de software op de foetale monitor. Bijlage 2 bevat ook instructies met betrekking tot het downloaden en installeren van software.

Opmerking: als u problemen ondervindt bij het downloaden van de software van de website, kan op verzoek een geprepareerde geheugenstick beschikbaar worden gesteld en worden geleverd.

FSN01-23-Rev 2

Datum van uitgifte: 3 april 2023

Herzien: 25 april 2023

HUNTLEIGH

A MEMBER OF THE ARJO FAMILY

Zodra de upgrade is voltooid op alle apparaten binnen uw instelling, stuurt u de ingevulde verklaring (zie bijlage 3) terug naar: FSN01-23HHL@Arjo.com.

Verzending van Field Safety Notice;

Zorg ervoor dat deze kennisgeving wordt verspreid onder alle relevante medewerkers.

Patiëntveiligheid en klanttevredenheid zijn van het allergrootste belang voor Huntleigh Healthcare Ltd en we betreuren het duidelijke ongemak dat deze kennisgeving zal veroorzaken.

Contact

Aarzel niet om contact op te nemen met het volgende personeel als u hebben elk verder vragen of vereisen elk bijstand:

QRE-directeur	E-mail: steve.monks@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885 Toestel: 7107
Klachtenspecialist	E-mail: michael.James@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885 Toestel: 7016
Service Manager (Gary Newton)	E-mail: TeamUpgrade-HHL.UKCAR@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885 Toestel: 7112
Product management	E-mail: David.dobbs@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885

Eerlijk,

...

...

Document Introductie/Revisie Geschiedenis

ds.	Datum	Beschrijving van Invoering	Gecompileerd Door
1	03/04/2023	Invoering van FSN.	...
2	25/04/2023	Geïnformeerde gebruiker over de noodzaak om de upgrade met v19.4.1 te herhalen. Heeft gewezen op het belang van het beheer van de patiëntendatabase. Ook verduidelijkt de gewenste capaciteit van Memory stick (4GB tot 8GB)	...

Bijlage 1

Lijst met producten waarop de veiligheidskennisgeving betrekking heeft

Item	Beschrijving	Apparaat-ID
OBIX IM2	TEAM3 INTRAPARTUM/PRINTER+NIBP+SPO2+EMHR-TWEELINGEN	05051968041234
OBIX IM3	TEAM3 INTRAPARTUM/PRINTER+NIBP+SPO2+EMHR-TRIPLETS	05051968040985
TEAM3A	ANTEPARTUM/PRINTER	05051968032485
TEAM3A 3	ANTEPARTUM/PRINTER-TRIPLETS	05051968035196
TEAM3A B	ANTEPARTUM/PRINTER+BATTERIJ	05051968032492
TEAM3A E	ANTEPARTUM/ECTG	05051968032508
TEAM3A N	ANTEPARTUM/PRINTER+NIBP	05051968032522
TEAM3A S	ANTEPARTUM/PRINTER+SPO2	05051968032560
TEAM3A B3	ANTEPARTUM/PRT+BATTERIJ-TRIPLETS	05051968035202
TEAM3A E3	ANTEPARTUM/ECTG-TRIPLETS	05051968035219
TEAM3A EB	ANTEPARTUM/ECTG+BAT	05051968032515
TEAM3A ENS	TEAM3 ANTEPARTUM +NIBP + SPO2, GEEN PRINTER	05051968039842
TEAM3A N3	ANTEPARTUM/PRT+NIBP-TRIPLETS	05051968035233
TEAM3A NB	ANTEPARTUM/PRINTER+NIBP+BAT	05051968032539
TEAM3A NS	ANTEPARTUM/PRINTER+NIBP+SPO2	05051968032546
TEAM3A S3	ANTEPARTUM/PRINTER+SPO2-TRIPLETS	05051968035271
TEAM3A SB	ANTEPARTUM/PRINTER+SPO2+BAT	05051968032577
TEAM3A EB3	ANTEPARTUM/ECTG+BAT-TRIPLETS	05051968035226
TEAM3A NB3	ANTEPARTUM/PRT+NIBP+BAT-TRIPLETS	05051968035240
TEAM3A NS3	ANTEPARTUM/PRT+NIBP+SPO2-TRIPLETS	05051968035257
TEAM3A NSB	ANTEPARTUM/PRINTER+NIBP+SPO2+BAT	05051968032553
TEAM3A SB3	ANTEPARTUM/PRT+SPO2+BAT-TRIPLETS	05051968035288
TEAM3A ENSB	TEAM3 ANTEPARTUM +NIBP + SPO2 + BATTERIJ, GEEN PRINTER	05051968039859
TEAM3A NSB3	ANTEPARTUM/PRT+NIBP+SPO2+BAT-TRIP	05051968035264
TEAM3G1	ANTEPARTUM/PRINTER/BASIC/ENKEL	05051968033192
TEAM3G1-ECTG	ANTEPARTUM/ECTG/BASIC/ENKEL	05051968033208
TEAM3G2	TEAM 3A BASIS	05051968033093
TEAM3G2-ECTG	TEAM 3A ECG BASIS	05051968033109
TEAM3I	INTRAPARTUM/PRINTER	05051968032584
TEAM3I 3	INTRAPARTUM/PRINTER-TRIPLETS	05051968035295
TEAM3I B	INTRAPARTUM/PRINTER+BATTERIJ	05051968032591
TEAM3I N	INTRAPARTUM/PRINTER+NIBP	05051968032997
TEAM3I S	INTRAPARTUM/PRINTER+SPO2	05051968033017
TEAM3I B3	INTRAPARTUM/PRINTER+BAT-TRIPLETS	05051968035301
TEAM3I N3	INTRAPARTUM/PRINTER+NIBP-TRIPLETS	05051968035318
TEAM3I NB	INTRAPARTUM/PRINTER+NIBP+BATTERIJ	05051968033000
TEAM3I NS	INTRAPARTUM/PRINTER+NIBP+SPO2	05051968033031

Item	Beschrijving	Apparaat-ID
TEAM3I S3	INTRAPARTUM/PRINTER+SPO2-TRIPLETS	05051968035356
TEAM3I SB	INTRAPARTUM/PRINTER+SPO2+BATTERIJ	05051968033024
TEAM3I NB3	INTRAPARTUM/PRT+NIBP+BAT-TRIPLETS	05051968035325
TEAM3I NS3	INTRAPARTUM/PRT+NIBP+SPO2-TRIPLET	05051968035332
TEAM3I NSB	INTRAPARTUM/PRINTER+NIBP+SPO2+BATTERIJ	05051968032980
TEAM3I SB3	INTRAPARTUM/PRT+SPO2+BAT-TRIPLETS	05051968035363
TEAM3I NSB3	INTRAPARTUM/PRT+NIBP+SOP2+BAT-TRI	05051968035349
TEAM3A ENM	ANTE/ECTG+NIBP+SPO2NEL	05051968041920
TEAM3A NM	ANTE/PRINT+NIBP+SPO2NEL	05051968041937
TEAM3A NM3	ANTE/PRINT+SPO2NEL-REIS	05051968041944
TEAM3A NMB	ANTE/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968041951
TEAM3A NMB3	ANTE/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT-TRIP	05051968041968
TEAM3A M	ANTE/PRINT+SPO2NEL	05051968041975
TEAM3A MB	ANTE/PRINT+SPO2NEL+BAT	05051968041982
TEAM3I NM	INTRA/PRINT+NIBP+SPO2NEL	05051968041999
TEAM3I NM3	SP-777232 ANALOOG SCHERM PCB	05051968042002
TEAM3I NMB	INTRA/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968042019
TEAM3I NMB3	INTRA/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT-TRIP	05051968042026
TEAM3I M	INTRA/PRINT+SPO2NEL	05051968042033
TEAM3I MB	INTRA/PRINT+SPO2NEL+BAT	05051968042040
TEAM3I ENSB	TEAM3 INTRAPARTUM/ECTG+NIBP+SPO2+BAT	05051968042064
OBIX AM2N	ANTEPARTUM - TWEELINGEN	05051968042071
OBIX IM2 D	INTRAPRTM/NIBP+SPO2+EMHR+DVI-TWIN	05051968042972
TEAM3A-USA ENM	ANTE/ECTG+NIBP+SPO2NEL	05051968042989
TEAM3A-USA NM	ANTE/PRINT+NIBP+SPO2NEL	05051968042996
TEAM3A-USA NM3	ANTE/PRINT+NIBP+SPO2NEL-TRIP	05051968043009
TEAM3A-USA NMB	ANTE/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968043016
TEAM3A-USA NMB3	ANTE/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT-TRIP	05051968043023
TEAM3A-USA M	ANTE/PRINT+SPO2NEL	05051968043030
TEAM3A-USA MB	ANTE/PRINT+SPO2NEL+BAT	05051968043047
TEAM3I-USA NM	INTRA/PRINT+NIBP+SPO2NEL	05051968043054
TEAM3I-USA NM3	INTRA/PRINT+NIBP+SPO2NEL-REIS	05051968043061
TEAM3I-USA NMB	INTRA/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968043078
TEAM3I-USA NMB3	INTRA/PRINT+NIBP+SPO2NEL+BAT-TRIP	05051968043085
TEAM3I-USA M	INTRA/PRINT+SPO2NEL	05051968043092
TEAM3I-USA MB	INTRA/PRINT+SPO2NEL+BAT	05051968043108
OBIX IM2 B	INTRA/NIBP+SPO2+EMHR+BATT-TWIN	05051968043412
TEAM3I E	TEAM3 INTRAPARTUM/ECTG	05051968044013
TEAM3A-USA EN	ANTE/ECTG+NIBP VS	05051968044020
TEAM3A-USA ENB	ANTE/ECTG+NIBP+BAT VS	05051968044037
TEAM3A-USA	ANTEPARTUM/PRINTER VS	05051968044242
TEAM3A-B-USA	ANTEPARTUM/PRINTER+BATTERIJ VS	05051968044259
TEAM3A-E-USA	ANTEPARTUM/ECTG VS	05051968044266

Item	Beschrijving	Apparaat-ID
TEAM3A-EB-USA	ANTEPARTUM/ECTG+BATTERIJ VS	05051968044273
TEAM3A-EN-USA	ANTEPARTUM/ECTG+NIBP VS	05051968044280
TEAM3A-ENB-USA	ANTEPARTUM/ECTG+NIBP+BATTERIJ VS	05051968044297
TEAM3A-N-USA	ANTEPARTUM/PRINTER+NIBP VS	05051968044303
TEAM3A-NB-USA	ANTEPARTUM/PRINTER+NIBP+BATTERIJ VS	05051968044310

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Inhoud

Door de Gebruiker en/of Distributeur te ondernemen acties;.....	2
Contact.....	3
Team3 V19.4.1 Upgrade installatiebewaking.....	8
Doel en reikwijdte.....	8
Verkrijg en installeer het Team3 V19.4.1-upgradepakket.....	8
Download de Team3 upgrade-installatiebewakingstool.....	8
Installeer de Team3 upgrade-installatiebewakingstool.....	8
Maak de Team3 Upgrade USB-stick aan.....	9
Selecteer geschikte USB-media.....	9
Schrijf upgradebestanden naar USB.....	9
Upgrade Team3-eenheden.....	10
Identificatie upgradeproces.....	10
Eenheden Pre 19.1.....	10
Eenheden 19.1 en hoger.....	10
Upgradeproces 1.....	11
Upgradeproces 2.....	11
Upgrade-verificatie.....	11
Upload logbestanden naar Huntleigh Server.....	12
Probleemoplossen.....	13
Verklaring Formulier.....	14
FSN01-23.....	14
Naar zijn keerde terug naar;.....	14

Team3 V19.4.1 Upgrade installatiebewaking Doel en reikwijdte

Dit document beschrijft het hele proces van het verkrijgen en installeren van de upgrade-monitoringtool, het maken van een upgrade-USB-stick, het upgraden van een of meer Team3-apparaten en het uploaden van de logbestanden naar de Huntleigh-server.

Verkrijg en installeer het Team3 V19.4.1-upgradepakket

Download de Team3 upgrade-installatiebewakingstool

Gebruik een pc met Microsoft Windows 10 of 11 die is verbonden met internet, open een webbrowser en navigeer naar het volgende websiteadres:

<https://www.huntleigh-diagnostics.com/Team3Upgrade19.4.1>


volg daarnaast de instructies om de software te downloaden.

NB Het is waarschijnlijk dat er verschillende beveiligingswaarschuwingen worden weergegeven voordat de download wordt toegestaan. Accepteer alle waarschuwingen om door te gaan met de download.

Installeer de Team3 upgrade-installatiebewakingstool

Voer na het downloaden het uitvoerbare bestand 'Team3 19.4.1 Upgrade.exe' uit om de software op de pc te installeren.

Klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand, selecteer 'Als administrator uitvoeren' en voer de beheerdersreferenties in. De installatiewizard wordt weergegeven:

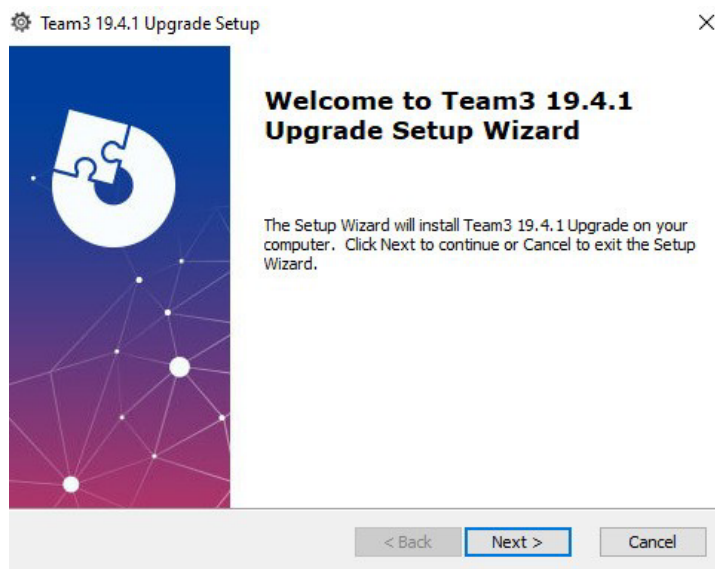

Volg de stappen van de installatiewizard om de installatie te voltooien.

Maak de Team3 Upgrade USB-stick aan

Selecteer geschikte USB-media


Het is belangrijk om een USB-geheugenstick van goede kwaliteit te gebruiken voor het uitvoeren van de upgrade. We raden een merk met een naam aan, zoals SanDisk, Transcend of Kingston. Het gekozen apparaat moet tussen de 4 GB en 8 GB zijn en fysiek in een USB-aansluiting aan de achterkant van de Team3 passen.

Schrijf upgradebestanden naar USB

Steek de USB-stick in een beschikbare poort op de pc. Het wordt aanbevolen, maar is niet verplicht, dat alle andere USB-geheugenapparaten worden verwijderd tijdens het uitvoeren van de handeling. Voer de software uit in beheermodus door:

- Klik op het Windows-startmenu, scrol omlaag en vouw het Huntleigh-mappictogram uit
- Klik met de rechtermuisknop op 'Team3UpdateTool' en vouw de opties 'Meer' uit
- Selecteer 'Als administrator uitvoeren' en voer de beheerdersreferenties in

Het volgende hoofdscherm wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat bij de eerste run alle bedieningsknoppen grijs zijn en niet beschikbaar zijn. Dit is het geval totdat er een geldig e-mailadres wordt ingevoerd in het daarvoor bestemde veld.

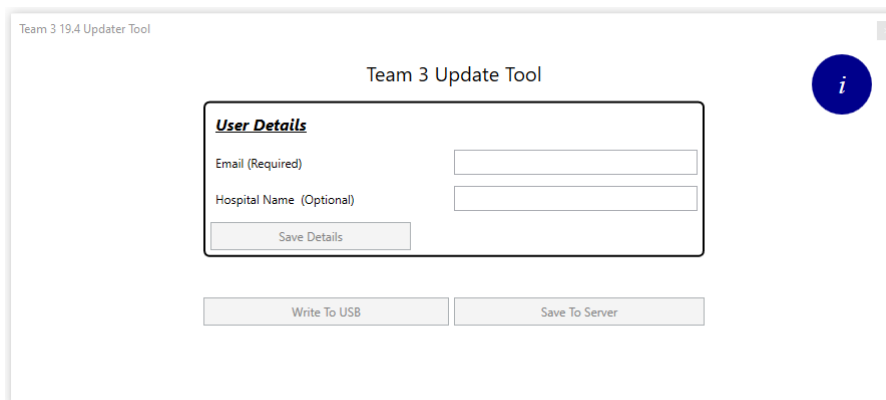


- Voer een geldig e-mailadres in – de knop 'Gegevens opslaan' wordt beschikbaar
- Vul eventueel ziekenhuisgegevens in en klik op de knop 'Gegevens opslaan'
- Klik op de knop 'Write To USB' die nu beschikbaar is

Het dialoogvenster 'USB-apparaat configureren' wordt weergegeven met een vervolgkeuzelijst van alle USB-apparaten van de juiste grootte die op de pc zijn aangesloten.

Selecteer het juiste apparaat uit de lijst en klik op de knop 'USB-apparaat configureren'. Een waarschuwing geeft aan dat de inhoud zal worden gewist - klik op 'Ja' om de bewerking te bevestigen. Het apparaat wordt geformatteerd naar FAT32 waarna de upgradebestanden ernaar worden geschreven. Na succesvolle afronding wordt er een melding naar de Huntleigh-server gestuurd die aangeeft dat er een upgrade-USB-stick is gemaakt, op voorwaarde dat er verbinding kan worden gemaakt. Het hele proces duurt ongeveer een minuut.

Sluit het dialoogvenster en sluit de toepassing af.

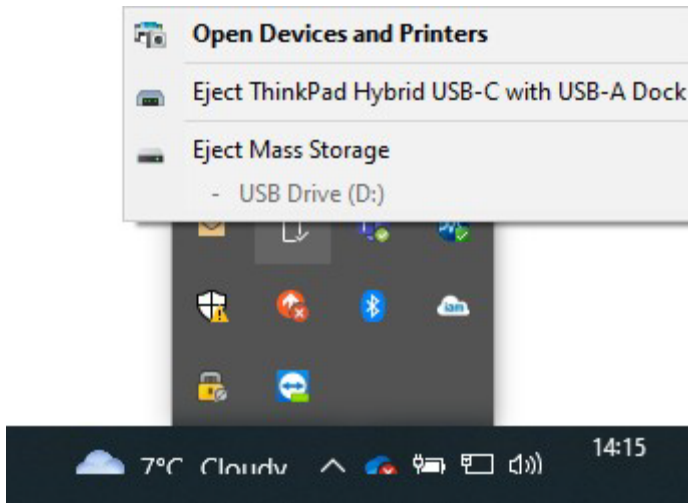

Werp het USB-apparaat uit (dit is belangrijk) en verwijder het van de pc. Het is nu klaar om te worden gebruikt om Team3-eenheden te upgraden.

Upgrade Team3-eenheden

Houd er rekening mee dat alle lokale en globale instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Bepaal en volg de juiste procedure om de upgrade uit te voeren, zoals hieronder beschreven:

Identificatie upgradeproces

Eenheden Pre 19.1

- Plaats de USB met de upgradesoftware.
- Schakel het apparaat in.
- Volg de instructies op het scherm.
- Ga naar "Upgrade verificatie" om de voltooiing te bevestigen.

Eenheden 19.1 en hoger

Eenheden met serienummers met uitgiftestatus 6, (21) 777## 6 #####, gebruik proces 1.

Eenheden met serienummers met uitgiftestatus 7, (21) 777## 7 #####, gebruik proces 2.

Sommige eenheden zijn geleverd voorafgaand aan de wijziging van de uitgiftestatus, om het upgradeproces voor deze eenheden te identificeren:

Schakel Team 3 in en observeer:

Eenheden die proces 1 upgrademethode vereisen.

- Het scherm wordt zwart nadat het eerste opstartscherm is weergegeven.

Eenheden die upgrademethode proces 2 vereisen

- Het opstartscherm blijft weergegeven en de voortgangsbalk onderaan het scherm wordt weergegeven.

Upgradeproces 1

- Steek Team3 in het stopcontact
- Plaats de USB met de upgradesoftware.
- Schakel het apparaat in.
- Als het scherm zwart wordt, tel dan 5 seconden.
- Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt en laat dan los.
- Als de knop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt, wordt het apparaat na 10 seconden uitgeschakeld.
- Volg de instructies op het scherm.

Upgradeproces 2

- Plaats de USB met de upgradesoftware.
- Schakel het apparaat in.
- Tel 5 seconden wanneer het opstartscherm voor het eerst verschijnt
- Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt en laat dan los.
- Als de knop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt, wordt het apparaat na 10 seconden uitgeschakeld.
- Volg de instructies op het scherm

Na succesvolle afronding zal er een bericht verschijnen om de USB-stick te verwijderen, waarna de Team3-unit wordt uitgeschakeld. Het apparaat is nu geüpgraded.

Herhaal het bovenstaande proces voor alle Team3-eenheden die moeten worden geüpgraded met dezelfde USB-stick.

Upgrade-verificatie

Schakel het apparaat in.

Aanraken



Aanraken

Secure Settings

Voer toegangscode in (standaard 12345)

Aanraken

Version Information

Controleer of de instellingen voor de geüpgradede monitor gelijk zijn aan de onderstaande instellingen met pijlen.

Version Information	
Component	Version
System Version	19.4.1
Language Version	16
Serial Number	<NO SERIAL NUMBER SET!>
Session	3459c430-580b-4141-f7fb-2339b5b063ef
IP Address	127.0.0.1
Physical Address	00:E0:4B:60:A2:4F
Total On Time	2h 33m 10s [Started 3/27/2023 11:04:31 AM]
UIP	5.308.8480.27742 built 3/21/2023 3:24:44 PM
Main Board	4
Peripheral Driver	0.0.6.1
PP: Printer	0.0.5.45 N
CP: Ultrasound	0.0.01.0017
CP: FECG	0.0.00.0003
CP: MECG	0.0.00.0003
CP: ClinicalCPLD	2.5
CP: ClinicalDsp	0.0.05.0263
CP: CommsProcessor	X
CP: ClinicalHardware	Antepartum; Dsp 2, Anlg 4

Upload logbestanden naar Huntleigh Server

Keer terug naar de pc waarop de Upgrade Monitoring Tool is geïnstalleerd en steek de USB-stick in een beschikbare USB-aansluiting. Voer de toepassing 'Team3UpdateTool' opnieuw uit in beheermodus, zoals beschreven in 3.2 hierboven. Bij deze en volgende runs worden de eerder opgeslagen e-mail- en ziekenhuisgegevens automatisch ingevuld en zijn de bedieningsknoppen beschikbaar.

Klik op de knop 'Verzenden naar server' om het dialoogvenster Verzenden naar server weer te geven.


Selecteer de upgrade-USB-stick in de vervolgkeuzelijst en klik op de knop 'Verzenden naar server'. Een lijst met de Team3-eenheden die met de stick zijn geüpgraded, wordt weergegeven in het schuifbare berichtenvenster. Als er geen serververbinding tot stand kon worden gebracht, probeer het dan later opnieuw.



Sluit het dialoogvenster en sluit de toepassing af.

Probleemoplossen

Als er geen geschikte USB-geheugenstick is geplaatst bij het schrijven van de upgradebestanden, wordt het volgende bericht weergegeven:

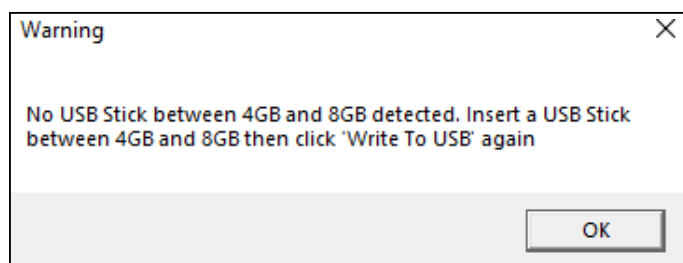

Als de USB-geheugenstick logbestanden bevat die zijn gemaakt tijdens een upgrade, wordt het volgende bericht weergegeven wanneer u probeert de upgradebestanden te schrijven:



Sluit in dit geval het dialoogvenster en plaats de USB-stick terug voordat u het opnieuw probeert.

Als de Team3 geen software-upgrade start wanneer de correct geïdentificeerde procedure voor het model wordt gevolgd, zorg er dan voor dat de USB-upgradestick volledig in een van de USB-poorten is gestoken (niet de Ethernet-poort) en probeer het opnieuw.

Als het nog steeds niet wordt gedetecteerd, is het mogelijk defect of niet compatibel. Vervang in dat geval de USB-stick door een ander merk of een van de merken die worden aanbevolen in paragraaf 3.1.

Een bijlage 3

Verklaring Formulier

FSN01-23

Naar zijn keerde terug naar;

[E-mail : FSN01-23HHL@Arjo.com](mailto:FSN01-23HHL@Arjo.com)

Naam:	
Positie/baan Titel:	
Faciliteit Naam / Adres:	
E-mail:	
Tel.:	

I verklaren Dat:

V19.4 Software heeft geweest geïnstalleerd op Team Foetaal Monitor voor de als vervolg op Serieel Nummer(s);

Serieel Nummer	(21)777
	Vervolgblad bijgevoegd

Naam (AFDRUKKEN): _____

Handtekening: _____

Datum: _____

Voortzetting van serienummerversoeking:

Serieel Nummer	(21)777